


KENTRO

ПРИЛАД ДЛЯ МАСАЖУ ШИЇ

Інструкція з експлуатації

Instruction Manual

KTR-101

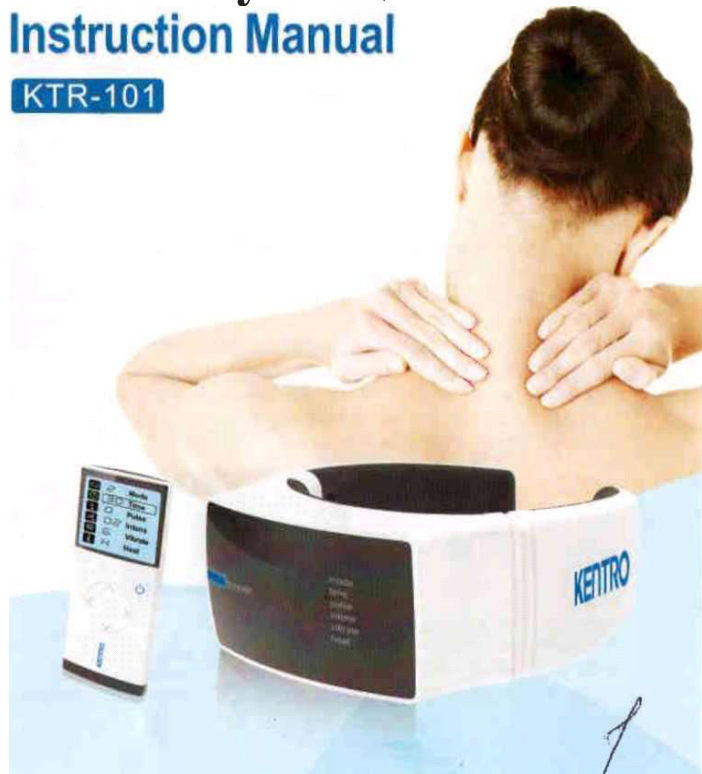

Технічний опис

Назва: Прилад для масажу шиї

Модель №: KTR-101

Вага: 630 г

Живлення: прилад на 6 В постійного струму потужністю ≤ 6 Вт

Акумулятор постійного струму кнопочного типу на 3 В, вбудований у контролер CR2032



Частота електричного імпульсу: 1-1 000 Гц

Ширина електричного імпульсу: 20-400 мікрон

Хвиля електричного імпульсу: прямокутна хвиля

Розмір подарункової коробки: 248 X 231 X 77 мм

Температура нагрівання: +40°C-+48°C (зберігати при температурі нижче 25 °C)

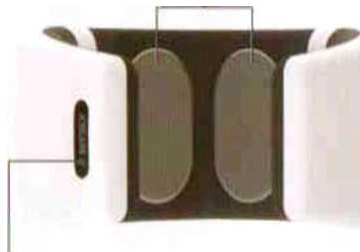

Презентація виробу

Ця терапевтична система для масажу шиї розвинулась на підставі переконань Китайського Меридіану.

Спроектований відповідно до природнього вигину шиї, цей пристрій використовує переваги низькочастотної електричної терапії, магнітної терапії, терапії дальнього інфрачервоного діапазону та терапії вібраційного масажу для перетворення

* *Conductor plate/heating plate* - Пластина, що проводить/пластина, що нагріває

* *Infrared receiver window* - Віконце інфрачервоного приймача

високоєфективних енергетичних полів для входження в глибинні випромінюючі поля тіла. Важливо зберігати правильну позицію, яка забезпечує наукову платформу для отримання максимальної користі від такої терапії. Цей масаж стимулюватиме циркуляцію крові, розслабить периферійні м'язи та усуне запалення, набряки, болі, втому, заляклість та головні болі.

Опис продукту

* Спроекований спеціалістом з питань інженерної науки та косметології і пристосований до природнього вигину шиї.

* Обігрів випромінюванням у дальньому інфрачервоному діапазоні, електричні імпульси, вібраційний масаж та магнітні поля поєднують свою потужність для формування високоякісного комбінованого енергетичного поля.

* Можливість використання налаштувань температури відповідно до персональних потреб та переваг.

* Можливість використання електронних імпульсів у 2 різних автоматичних режимах комбінованої терапії разом з 4 різними режимами мануальної терапії відповідно до персональних потреб та переваг.

* Можливість використання 6 різних режимів вібраційного масажу відповідно до персональних потреб та переваг.

* Вбудовані магніти для підтримки здоров'я створюють акупунктурні точки на тілі, і, таким чином, збалансують його Ін'є та Янь для покращення мікроциркуляції току крові.

* Просте керування за допомогою дистанційного контролера і рідкокристалічного екрану з підсвічуванням.



* *Power Indicator* - Індикатор живлення

* *Blue lights bright: Working status* - Блакитні лампочки світяться: робочий стан

* *Green lights flash: charging status* - Зелені лампочки миготять: стан зарядки

* *Green lights bright: Fully charged status* - Зелені лампочки світяться: стан повної зарядки

* *DC Interface* - Інтерфейс ПС

* *Charging switch (Rechargeable type)* - Перемикач зарядки (для типу моделей, що перезаряджаються)

* *Power Switch (Normal type)* - Силовий перемикач (нормальний тип)



* *Massages Modes* - Режими масажу

* *Timer* - Таймер

* *Electric Impulse* - Електричний імпульс

* *Intensity Adjust* - Регулювання інтенсивності

* *Vibration* - Вібрація

* *Heating Therapy* - Терапія нагрівання

* *Choosing item upward* - Вибір вгору за списком

* *Decreasing, Choosing Number* - Зменшення, вибір цифри

* *Infrared Dispatch window* - Віконце для передачі інфрачервоного випромінювання

* *LCD Pattern* - Рідкокристалічний екран

* *Power Button* - Кнопка живлення

* *Increasing, Choosing Number* - Збільшення, вибір цифри

* *Choosing Item Downward* - Вибір вниз за списком

* Button Battery CR 2032 - Кнопкова батарея CR2032

* Adaptor - Адаптер

Робочі методи

Зарядка

* Адаптер для зарядки


Вставте адаптер у прилад та у джерело живлення.

* Джерело живлення для перезарядження (застосовується для моделей, що перезаряджаються). Коли адаптер не використовується, прилад може працювати з вбудованими батарейками, придатними для перезарядження.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1) Вставте перемикач режиму роботи у положення "ON" (ВКЛ.).

2) Будь ласка, використовуйте вологий рушник, щоб зробити комірць, та випрасуйте його до ледве вологого стану. Витріть шию насухо від поту. Потім пристосуйте прилад до шиї.

3) Натисніть кнопку  для початку роботи. Зверніть увагу на дзигчання і світловий індикатор, який вказує на запуск. Рідкокристалічний дисплей на дистанційному контролері відображає статус після входу в автоматичний режим. (Високий рівень тепла, Багатофункціональна вібрація, Перший вібраційний масаж, Таймер включений на 15 хвилин).

Просто натисніть знову цю кнопку  для завершення роботи.

Коли дистанційний контролер і прилад для масажу синхронізовані, Ви почуєте одиничне дзигчання.


4) Використання наступних кнопок:

Кнопка «^» призначена для вибору режимів вгору за списком, а кнопка «v» - для вибору режимів униз за списком.


5) Використання наступних кнопок:

«<» – кнопка для зменшення; «>» – кнопка для збільшення.


6) Переключення режимів

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть , потім натисніть на <або> для вибору одного з шести різних режимів, відмічених наступним чином: 1-AUTO MODE (1-АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ), який поєднає усі наступні режими: вібрація та нагрівання, нагрівання та подача електричних імпульсів, нагрівання, вібрація, автоматичне повторення електричних імпульсів; 2-вібрація та лікування; 3-нагрівання та подача електричних імпульсів; 4-нагрівання; 5-вібрація; 6-подача електричних імпульсів.


7) Інтенсивний режим

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть , потім натисніть на <або> для зміни інтенсивності електричних імпульсів (16 рівнів) або інтенсивності вібрації (3 рівня).


8) Переключення режимів нагрівання

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть , потім натисніть на <або> для встановлення рівня тепла у високе (H), низьке (L) чи нульове положення (O).


9) Режими електричних імпульсів

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть , потім натисніть на <або> для вибору одного з 6 імпульсних режимів.

10) Вібраційні режими

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть , потім натисніть на <або> для вибору одного з 6 вібраційних режимів, включаючи режими: «автоматичний вібраційний масаж», «тільки вібрація», «розминання», «биття», «натискання і розкачування».

11) Робота таймера

За допомогою кнопок «^» та «v» виберіть позначку , потім натисніть на <або> для налаштування періоду роботи таймеру з 5 до 30 хвилин через 5-хвилинні інтервали.

12) Акумуляторна батарея

Будь ласка, зарядіть батарею, коли живлення знаходиться на низькому рівні. Просто перемикніть кнопку „ON/CHARGE” (ВКЛЮЧЕНО/ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ) в положення "CHARGE" (ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ), після чого індикатор буде миготіти зеленим кольором. Коли індикатор перестане миготіти і залишиться зеленим, це буде означати, що живлення повністю відновлене. Повне зарядження займає приблизно 3-4 години.

13) Цей прилад для масажу шиї рекомендується застосовувати двічі на день впродовж 15 хвилин для виконання вібраційного масажу і масажу електричними імпульсами, а також 15 хвилин для проведення нагрівання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Прилад не можна застосовувати разом із ВОДИСМ РИТМУ СЕРЦЯ.
2. Не використовуйте прилад біля мікрохвильової печі або поруч із приладами, які працюють в інфрачервоному діапазоні.
3. Вагітні жінки та пацієнти з серцево-судинними захворюваннями повинні проконсультуватися з лікарем щодо застосування цього приладу.
4. Не використовуйте прилад під час сну чи прийняття душу.
5. Дітям або особам, які не можуть спілкуватися, не можна використовувати цей прилад.
6. Не використовуйте прилад у разі підвищеної чутливості шкіри або чутливості до тепла.
7. Не змінюйте режим роботи під час роботи приладу. Для зміни режиму вимкніть прилад і здійсніть повторний запуск.
8. Підвищена інтенсивність тиску, потужності чи тепла не призводять до більш корисного терапевтичного ефекту.
9. Не розбирайте прилад жодним способом і не занурюйте його у воду, а також не застосовуйте воду у безпосередньому контакті з приладом під час його чистки.

Чистка та зберігання

1. Для чистки застосовуйте м'який ледве вологий рушник.



**Infrared Receiving Window - Віконце для отримання інфрачервоного випромінювання.*

**Infrared Emission Window - Віконце генерування інфрачервоного випромінювання.*

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Під час первинного запуску тримайте віконце генерування інфрачервоного випромінювання, що знаходиться на контролері, та віконце для отримання інфрачервоного випромінювання, що знаходиться на головному блоці, безпосередньо одне навпроти іншого таким чином, як показано на вищезазначеному малюнку. Таке положення необхідне для роботи дистанційного контролера. Кожна допустима операція на дистанційному контролері буде супроводжуватися «гудком» під час запуску.

2. Будь ласка зарядіть прилад, коли живлення знаходиться на низькому рівні. Просто перемикніть кнопку „ON/CHARGE” (ВКЛЮЧЕНО/ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ) в положення "CHARGE" (ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ), після чого індикатор буде миготіти зеленим кольором. Коли індикатор перестане миготіти і залишиться зеленим, це буде означати, що живлення повністю відновлене. Повне зарядження займає приблизно 3-4 години.

Якщо дистанційний контролер не працює, коли головний блок заряджений і блоки розташовані у належному положенні, будь ласка, замініть батарею CR2032 у дистанційному контролері.

2. Зберігайте у сухому, добре вентильованому місці.

3. Не тримайте під прямим сонячним світлом або у надзвичайно гарячому вологому місці.